




Brskin

B r s k i n

مزيل الشعر
جهاز LY-508 النوع المنزلي

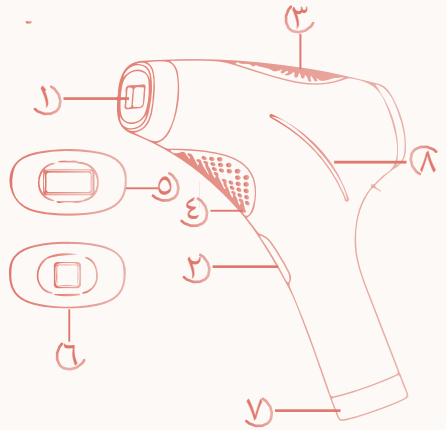

- (1) نافذة الوميض.
- (2) زر الوميض.
- (3) مخرج الهواء.
- (4) مخرج الهواء.
- (5) رأس MINI الكبير.
- (6) رأس MINI الصغير.
- (7) منفذ الشحن.
- (8) مؤشر وضع الشحن للنس.

يمنع منعاً باتاً قفل مخرج ومخرج الهواء بالمخلفات وحدث هذا الأمر سوف يسبب ضرراً جسيماً للجهاز.

تعريف بالمنتج:

عن جهاز LY-508 لإزالة الشعر (النوع المنزلي)

يحتاج جهاز LY-508 المنزلي لإزالة الشعر أولاً إلى إزالة الشعر عن سطح الجلد باستخدام شفرة الحلاقة، بعد ذلك تعريض الجلد لإشعاع الضوء الفايض القوي حتى تتعرض بصيلات الشعر والأسجة المحيطة لتغيرات ببنوية ناتجة عن زيادة درجة الحرارة وبالتالي يتسبب تثبيط نمو الشعر في تقلصه وتساقطه.

بالرغم من أن تصميم هذا المنتج قد راعى الإناث إلا أنه قد أثبتت التجارب أنه يمكن للرجال أيضاً استخدامه، ذلك لأن معظم الرجال قد يتمتعون بشعر أكثر سماكاً من النساء فإثر إزالة الشعر للرجال يختلف بشكل طفيف عن النساء.

يحتوي هذا الجهاز على نظام تصفية رائع يمكنه حجب الضوء الضار بصورة جيدة ومنع خطر تسرب الضوء.

تم تصميم جهاز LY-508 لإزالة الشعر للاستعمال العائلي والشخصي. وفقاً للاختيارات التجريبية فإن الجهاز مناسب لجميع أنواع ولوان البشرة عدا السوداء. (الرجاء الرجوع إلى "إحتياطات السلامة" لمعرفة الأماكن التي لا يمكن استخدامه عليها).

شكراً لاختيارك جهاز LY-508 لإزالة الشعر. الرجاء قراءة التعليمات بعناية قبل استخدام المنتج.

رقم الطراز	المواصفات والمعايير
LY-508	الوزن 1.2 كجم تيار متردد 100-240 فولت/ 50-60 هيرتز 8.0 واط شدة الضوء 0 مستويات قابلة للضبط. درجة الحرارة المحيطة 0 ~ 50 درجة مئوية. الرطوبة النسبية ≥ 80% الضغط الجوي 86.0 ~ 106.0 كيلو باسكال. متطلبات بيئية تجنب ضوء الشمس المباشر. تبريد الهواء طول إزالة الشعر 10.0 ~ 12.0 نانومتر المعيار المنفذ جي بي ٦٠٦١ ٤٧

إعداد ما قبل الاستخدام:

- نظف الجلد تماماً وتأكد من خلوه من الشعر وأنه جاف تماماً وليس هنالك أي مواد زيتية (عطر، مرطب، سائل تنظيف الجسم، واقي شمس وغيرها من الرواسب).
- تحقق من أن منفذ الإشعاع خالي من الأوساخ كالغبار والشعر وليس هنالك تلف أو خلل. إذا وجدت بعض الأوساخ قم بإزالتها تفادياً لتلف وتدهور المنتج ومشاكل البشرة.



ضبط شدة التعرض:

هذا المنتج مطور خصيصاً لإزالة الشعر بالمنزل، لذا فإن طاقة ضوءه أخف، يوفر 5 أنواع مختلفة من طاقة الضوء، يمكنك ضبط طاقة الضوء لتناسب لون بشرتك وشعر جسمك وتجعلك تشعر بالارتياح. مقياس طاقة الضوء التالي الموصى به سوف يساعدك في تحديد طاقة الضوء المناسبة لك.

1/ الرجاء الرجوع للجدول التالي لتحديد أي كثافة ضوئية تناسب لون بشرتك وشعرك. نصيحة: يمكنك وضع النموذج في "الليل البدء السريع" على بشرتك ومقارنته مع درجة لون بشرتك.


نصيحة: يوصى بحفظ دليل للرجوع إليه مستقبلاً.

2/ إذا شعرت بأي ألم أو عدم ارتياح يرجى تقليل كثافة الضوء. الأشخاص أصحاب البشرة الأكثر سواداً معرضون أكثر من غيرهم للإصابة بحساسية الجلد لأن بشرتهم تمتص ضوءاً أكثر من غيرهم، لذا نوصيهم باستخدام أقل درجة كثافة ضوئية. من الممكن أن تكون دافئة أو ساخنة على الجلد لكن يجب أن لا تكون مؤلمة.

نقاط رئيسية لإزالة الشعر:

النقاط الرئيسية لإزالة الشعر بمناطق مختلفة:

- 1- إزالة شعر الإبطين:
 - قبل إزالة الشعر يرجى إزالة مزبل العرق
 - في الأجزاء التي يكون فيها الجلد مرتخي قم بشد الجلد بأصابعك ثم أزل الشعر.
- 2- إزالة شعر خط البيكيني:
 - في مناطق تراكم الألوان والمناطق ذات اللون الداكن يرجى استخدام درجة منخفضة. يرجى استخدام التمشيق الأولى قبل التكيف معها.

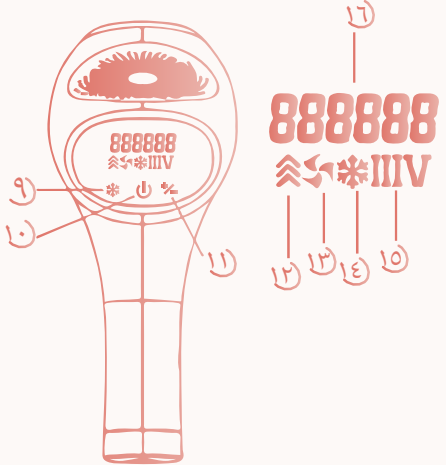

- (9) زر التبريد.
- (10) محول الطاقة.
- (11) زر المستوى.
- (12) نمط وميض اللمس المستمر.
- (13) عرض المروحة.
- (14) عرض التبريد.
- (15) عرض المستوى.
- (16) عرض عدد الشعيرات

اختبار تعرض الجلد للإشعاع:

لون الشعر	لون الجلد					
	أبيض	بيج	بني فاتح	بني متوسط	بني داكن	بني شديد الداكن
أبيض/رمادي	X	X	X	X	X	X
أحمر	X	X	X	X	X	X
ذهبي فاتح	X	X	X	X	X	X
ذهبي داكن/ بني فاتح	4/5	4/5	4/5	1/2/3	X	X
بني	4/5	4/5	4/5	1/2/3	X	X
أحمر داكن	4/5	4/5	4/5	1/2/3	X	X
أسود	4/5	4/5	4/5	1/2/3	X	X

إذا كانت هذه أول مرة تستخدم فيها هذا المنتج أو قد قمت مؤخراً بتسمير بشرتك فإنه يتوجب عليك القيام باختبار الجلد على أي جزء يجب أن يتعرض للإشعاع. اختبار الجلد مطلوب لفحص استجابة الجلد للتعرض وتحديد الضبط المناسب لكثافة الضوء لكل جزء من الجسم على حدة.

1/ اختر موقعاً بالقرب من الموقع المراد تعريضه للإشعاع.
ملاحظة: لا تحاول استخدام هذا المنتج على المناطق الصعبة أو الحساسة (كأحد أو عظم).

2/ اضغط مفتاح التشغيل لتشغيل الجهاز. تأكد من اختيارك ضبط الدرجة الأولى.

3/ ضع الجهاز بشكل عمودي على الجلد لجعل فتحة الموميض تلامس الجلد.

4/ اسحب الجهاز مقابل الجلد إلى الجزء التالي لتعرضه للإشعاع.

5/ قم بزيادة الإعدادات رويداً رويداً، ابعث ومضة، ثم اسحب الجهاز إلى الموضع التالي. أعد هذه العملية على جميع المستويات ضمن نطاق كثافة الضوء الموصى به لنوع بشرتك.

6/ بعد اختبار الجلد سوف تتأكد من حالة بشرتك بعد ساعتين، إذا لم يكن هنالك أي توهات (احمرار، تقرحات) في المنطقة التي تعرضت للإشعاع، حينها يمكنك استخدام الجهاز بكل سهولة.

(ملاحظة: X تعني أن هذا غير مطبق)

ملاحظة: إذا أردت التحقق من أن هذا الجهاز يتناسب مع نوع بشرتك أم لا يرجى مراجعة جدول لون البشرة.

ملاحظة: قد تتفاعل بشرتك بشكل مختلف بسبب اختلاف وقت/مكان استخدام الجهاز.

خطوات الاستخدام:


خطوات نمط الموميض المتقطع:



1/ استخدم الشفرة لتحلاقة الشعر من المنطقة التي تحتاج إلى استخدام الجهاز عليها.



2/ قم بتوصيل مصدر الكهرباء، ومؤشرات اللس الثلاثة مضاءة.

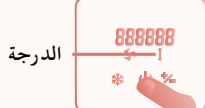

3/ لتشغيل الشاشة اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لمدة ثانيتين. الرقم الظاهر يوضح موضع الدرجة



4/ زر الموميض

هذه المرة الجهاز موضوع عمودياً على الجزء المراد إزالة الشعر منه. رأس مصباح الجسم مطابق تماماً للجلد، وضوء مؤشر اللس يوميض. بعد أول 5 ثايات يحدث الموميض وتبدأ إزالة الشعر.

(ملاحظة: إذا كان رأس مصباح الجهاز غير متطابق تماماً مع الجلد لن يوميض ضوء المؤشر).
يعلق تلقائياً إذا لم يستخدم لخمس دقائق.



4/ قارن بشرتك مع بطاقة لون البشرة. إذا كان لون بشرتك X يرجى عدم استخدامها عليها.



5/ أثناء التشغيل يجب أن تضع نظارات الحماية الاحترازية المرفقة مع هذا المنتج تقادياً لتعرض العينين للوميض



6/ هذه المرة اختر مختلف الدرجات (1 أو 2 أو 3 أو 4 أو 5) وفقاً لمتطلباتك الخاصة والدرجة المطابقة يتم عرضها.

تبريد البشرة:



مؤشر تبريد البشرة
مؤشر تبريد البشرة
مؤشر تبريد البشرة
مؤشر تبريد البشرة
مؤشر تبريد البشرة
مؤشر تبريد البشرة
مؤشر تبريد البشرة
مؤشر تبريد البشرة
مؤشر تبريد البشرة
مؤشر تبريد البشرة

نمط لمس الموميض المستمر



7/ المس أضواء نمط الموميض لتشير إلى الدخول في لمس نمط الإزالة المستمر



8/ زر الموميض
1/ اضغط مطولاً على زر الموميض لأكثر من 5 ثواني في النمط المتقطع

- يوصى بحفظه بعيداً عن الماء خلال الست ساعات التالية لإزالة الشعر. بعد ذلك يمكن استخدام ماء مرطب لترطيب المنطقة التي تعرضت للإشعاع.
- لا تستعمل عطر أو قناع وجهي أو مستحضرات تجميل تحتوي على حبات بلورية بعد إزالة الشعر.
- خلال 24 ساعة يرجى تجنب التعرض للأشعة فوق البنفسجية ووضع واقي الشمس إذا اقتضت الضرورة.
- غير مسموح بتسمير الجلد الاصطناعي أثناء فترة إزالة الشعر.
- إذا احتجت لجراحة تجميلية بعد إزالة الشعر (ترجع فقط إلى المنطقة المزال عنها الشعر) فاستشر طبيبك .

الفواصل الزمني للاستخدام:

موعد الفاصل الزمني

الأسبوع 1-4 استخدمه مرتين بالأسبوع

الأسبوع 5-8 استخدمه مرة كل أسبوع-أسبوعين

بعد الأسبوع الثامن استخدمه مرة في الشهر أو نصف الشهر

التنظيف والصيانة:

صيانة الجهاز

للتأكد من أفضل التأثيرات وأطول مدة خدمة ممكنة يرجى تنظيف الجهاز كل مرة قبل وبعد إزالة الشعر لتجنب تراكم بقايا الشعر والغبار على المدى الطويل. إذا لم تهتم بتنظيفه بشكل جيد فلن يقدم هذا المنتج الأثر المرجو منه.

- افحص الجهاز خصوصاً نافذة الوميض وأجزاء هيكله للتأكد من أنها نظيفة ومرتبعة.
- لا تغسل هذا المنتج تحت الصنبور أو غسله بالأواني.
- لا تستخدم كرات الفولاذ أو المنظفات الكاشطة (معجون الأسنان وغيره) أو السوائل المسببة للتآكل (جازولين، زيت الماكينة، الأسيتون وغيرها) لتنظيف هذا المنتج.
- ملاحظة: إذا لم تستطع تنظيف نافذة الوميض فتوقف عن استخدام المنتج.



- أوقف تشغيل الجهاز، افصل مقبس الكهرباء واتركه ليبرد.
- عند استخدام هذا المنتج فإن نافذة الوميض سوف تزداد سخونة، يرجى تركها حتى تبرد ثم تنظيفها.
- إذا دعت الحاجة قم بتنظيف الجهاز من الخارج بقطعة قماش ناعمة.
- قم بترطيب قطعة قماش ناعمة ببضع قطرات من الماء ثم استخدمها لتنظيف نافذة الوميض.



ملاحظة: إذا لم تنظف بالماء جيداً يمكنك استخدام بضع قطرات من الكحول عالي التركيز (ليس أكثر من 6%) لتنظيفه.

الحماية البيئية:

عند التخلص من المنتج يرجى عدم رميه مع النفايات المنزلية العادية. يجب تسليمه لمركز إعادة التدوير المعين وهذا هو الأفضل بالنسبة للبيئة.



المجال الكهرومغناطيسي:

هذا المنتج متوافق مع كافة المعايير واللوائح الخاصة بالتعرض للمجالات الكهرومغناطيسية.

المشكلات الشائعة وحلولها:

يصف هذا الجزء المشكلات التي قد تعيق استخدام هذا المنتج. إذا لم تتمكن من حل المشكلات بالاستعانة بالمعلومات التالية اتصل بمركز خدمات العملاء بمنطقتك.

المشكلة	السبب الممكن	حل المشكلة
فشل التشغيل	الطاقة غير موصلة جيداً	تأكد ما إذا كانت الطاقة موصلة بشكل جيد
خزل في الوميض	إما أن تكون درجة حرارة رأس المضيف وهيكلة عالية أو رأس المضيف مقارب لارتفاع درجة الحرارة	انتظر إلى أن يبرد الجهاز وحافظ على وضع رأس الجهاز قريباً من الجلد إلى أن يضيء المؤشر الضوئي تأكد من أن مصدر الطاقة يعمل بشكل جيد أصلح الجهاز أو أعد فوراً
خزل في مؤشر العمل	هنالك أمر خاطئ بالجهاز	امسح الفلتر احلق الشعر لتقليل كثافة الضوء
انبعاث راحة عند الوميض	الفلتر متسخ وملوث بقايا شعر الجسم	قبل استخدام هذا المنتج قم بحلاقة الشعر لإزالة الشعر إذا تسببت الحلاقة بتهييج الجلد يرجى تقصير الشعر بقدر الإمكان واستخدام الجهاز بضبط مريح
لم تقم بحلاقة الشعر لإزالة الشعر	الجزء منزوع الشعر لا يناسبه استخدام هذا الجهاز	لا تستخدم هذا الجهاز على الشفرين والمهبل وفتحة الشرج والحلمتين وهالات الحلمتين. يجب أن لا يستخدمه الرجال على الوجه
الم غير محتمل أثناء إزالة الشعر	نافذة الوميض تالفة	أصلحها أو أعد المنتج فوراً
احمرار الجزء منزوع الشعر بعد إزالة الشعر منه	الاحمرار الطفيف أمر عادي وغير مضر للجسم وسوف يتلاشى قريباً	ليس هنالك أي إجراء مطلوب

المشكلة	السبب الممكن	حل المشكلة
أثر إزالة الشعر لم يكن مُرضياً	استخدمت ضبط شدة ضوء منخفضة جداً بالنسبة لك	يرجى اختبار شدة ضوء أعلى المرة القادمة يجب أن تومض بالقرب من الأجزاء المضاءة مسبقاً ويجب أن يكون هنالك تداخل بين مناطق الوميض
لا يوجد صوت مروحة	لم تضع فلاش المنتج قريباً من الأجزاء المضاءة مسبقاً	إذا كان لون شعرك ذهبي فاتح أو رمادي أو أحمر أو أبيض فإن التعرض للإشعاع سوف لن يترك أثراً
صار الجهاز ساخناً ورطباً أثناء الاستخدام	عدم تكرار استخدام هذا الجهاز بشكل كافي	يوصى باتباع نظام مخطط التعرض للإشعاع الموصى به لإزالة كل الشعر بنجاح
إثارة أو حكة في المنطقة	استجابتك للتعرض للضوء بطيئة	يجب استخدام هذا المنتج باستمرار لمدة لا تقل عن 6 أشهر لأن إعادة إنتاج الشعر من الممكن أن تظل مثبثة خلال هذه المدة
لا يوجد صوت مروحة	المروحة مكسورة أو التوصيل غير جيد	أرجع إلى الموزع
لا يوجد صوت مروحة	إنه أمر طبيعي	لا حاجة للقيام بأي تصرف

خطر

- ⊘ تحذير: لا تستخدم هذا المنتج بالقرب من حوض الاستحمام أو أرضية الاستحمام أو حوض الغسيل أو الأواني المائية الأخرى. يرجى حفظ المنتج ومحول الكهرباء جافاً.
- ⊘ إذا تحطم المنتج لا تلمس أي من الأجزاء الداخلية تفادياً للتعرض لصعقة كهربائية.
- ⊘ لا تدخل أي شيء إلى داخل المنتج.
- ⊘ لا تستخدم هذا المنتج حول العينين، قد تسمى النظارات الواقية المستخدم في التشغيل العادي، لكن إذا استخدمته حول العينين قد لا تمنع النظارات الواقية الإمتصاص الكامل للطاقة بواسطة ميلانين القرحة في عينيك عن قرب.
- ⊘ يُقترح أن تضع النظارات الواقية في كل مرة تستخدمه فيها، بالرغم من أن الإضاءة سيكون لديها تأثير مباشر على عينيك فإن ضوء الكشاف عالي التردد قد يؤثر على الإبصار.
- ⊘ قد تحتاج إلى مساعد أو شريك عندما تحتاج لإزالة شعر الظهر، فإبنا نخشى أن نتعرض للخطر إذا استخدمته لوحده.
- ⊘ إذا كان شعرك أطول من ٨م يرجى إزالة شعر الجسم أولاً. ننصحك باستخدام ماكينة الحلاقة الكهربائية. الشعر الطويل جداً قد يمتص الحرارة في سطح الجلد الأمر الذي قد يؤدي إلى احمرار الجلد وتورمه، وقد تنتج روائح من الشعر المحترق ما قد يؤثر على تجربة استخدامك للمنتج.
- ⊘ إذا كان جلد المنطقة المعرضة للإشعاع غير جاف أو غير نظيف فإن هذا سوف يؤثر على تأثير الاستخدام وقد يتسبب في أن لا يومض المنتج أو يؤدي إلى الوميض العرضي.
- ⊘ لا نملك بيانات كافية حول استخدام الأطفال دون سن ١٥ لهذا المنتج، لذا يرجى منع الأطفال دون سن ١٥ من التعامل مع هذا المنتج والابتعاد عنهم عند تشغيل الجهاز.

غير مناسب للأشخاص والأوضاع التالية:

- يحظر استخدامه على الحوامل والمرضعات وأثناء الدورة الشهرية والأشخاص الذين لديهم ندوب جلدية ومرضى السكري وأصحاب البشرة الضعيفة وأصحاب البشرة الحساسة للضوء.
- يحظر استخدامه على الذين يعانون من أمراض خطيرة بالقلب أو ضغط الدم المعتدل أو الحاد أو الأورام الخبيثة أو التهابات الجلد أو مرض جلدي معدني أو حروق جلدية أو اضطراب مضادات التجلط.
- يحظر استخدامه على الذين يعانون من الأيض غير الطبيعي للكولاجين بما في ذلك تاريخ الندوب أو تجميعة جروح.
- يحظر استخدامه على الذي يعانون من أمراض الأوعية الدموية إذا كان هناك دوللي في الأوردة وتوسع في الأوعية في المنطقة المعرضة للإشعاع.
- يحظر استخدامه على أصحاب البشرة الحساسة للضوء والطفح الجلدي أو الحساسية.
- يحظر استخدامه على المصابين بمرض ميثبط للمناعة (بما في ذلك الإصابة بالإنز، الذئبة الحمامية، البورفيريا وغيرها).
- يحظر استخدامه على الذين قد استخدموا مزيل شعر كيميائي خلال ٣٠ يوم والذين استخدموا مستحضرات تفتيح البشرة قبل وقت ليس ببعيد، أو يستخدمون مستحضرات تجميل تحتوي على فيتامين (أ).
- يحظر استخدامه جنباً إلى جنب مع منتجات الزيت الأساسية.
- يحظر استخدامه على الذين يتناولون الأسبيرين والأدوية المثبطة للمناعة والأيزوتريتينوين والأدوية المشابهة، بوصى بعدم استخدامه للذين قد استخدموا أدوية حساسة للضوء (كالترتريسين والسيلفوناميد وغيرها).
- بالنسبة لمن يعانون من ضرر ضوئي (حروق شمس) يرجى الانتظار حتى يتعافى الجلد قبل الاستخدام. يحظر استخدامه في مناطق العشاء المخاطي والمناطق الحساسة الأخرى.
- يمنع منعاً باتاً استخدامه في حالة أي نوع من أنواع الجروح غير الملتئمة. يحظر استخدامه على من يعانون من اضطراب فرط الشعر أو فرط شعر الجلد الناتج من أمراض أخرى.
- تناول مسكنات الألم قد سوف يقلل من حساسية الجلد للحرارة، لذا بوصى بالحذر عند استخدام المنتج قبل زوال تأثير المسكن.
- لا تستخدم هذا المنتج إذا كان لون جلدك أو شعرك غير مناسب (عند الضرورة استشر طبيبك قبل الاستخدام).

لا تستخدمه في أجزاء الجسم أو الحالات التالية:

- ١/ تجويف الفم، الفرج، مناطق العشاء المخاطي وغيرها
 - ٢/ الأجزاء التي خضعت لعمليات جراحة تجميلية.
 - ٣/ الحنجرة.
 - ٤/ العيون والجفون وحول العينين.
 - ٥/ الرأس.
 - ٦/ الثؤور.
 - ٧/ البقع والوحمات.
- ٨/ الحواجب.
- ٩/ الأذن.
- ١٠/ حلمة الثدي وهالتها.
- ١١/ داخل السرة.
- ١٢/ الوريد الأكبر.
- ١٣/ الأوشام والرسوم على الجلد.

ملاحظة: هذه القائمة ليست على سبيل الحصر، يرجى استشارة طبيبك إذا لم تكن متأكدًا من إمكانية استخدامك لهذا المنتج

تحذير

- 1 لا تضع مزبل العرق مباشرة بعد استخدام الجهاز على الإبط.
- 1 يرجى إزالة الأوساخ عن فتحة الضوء بشكل دوري لتجنب الاحتراق والأعطال.
- 1 لا تضع فتحة الضوء بالقرب من الأجسام التي من الممكن أن تتمغظ بسهولة لتجنب القصور والتلف.
- 1 لا تستخدمه إذا كانت فتحة التنفيس مغلقة تقادياً للتسبب في تصاعد الدخان واندلاع النار.
- 1 لا تصوب فتحة الضوء على الأجسام السوداء للمحافظة على أداء الماكينة بصورة جيدة.
- 1 لا تستخدم الجهاز على الملابس والشعر والأشياء الأخرى تجنباً للإسوداد وتغير اللون والتلف.
- 1 لا تستخدمه على الشامات تقادياً لإصابتها بالجروح.
- 1 لا تستخدمه بالقرب من الأطفال؛ لأن جهاز إزالة الشعر هذا سوف ينبعث منه ضوء قوي جداً قد يؤدي العينين.
- 1 يرجى ضبط شدة الشعاع وفقاً لحالة بشرتك، احرص على استخدام الدرجة الأولى عند استخدامه أول مرة.
- 1 ارتفاع حرارة الجلد واحمراره بشكل طفيف بعد الاستخدام أمر عادي.
- 1 إذا كان اختلاف درجة الحرارة المحيطة أكثر من 20 درجة مئوية (من درجة الحرارة الدنيا إلى العليا أو العكس)؛ يرجى إطفاء الجهاز وانتظاره حوالي ساعتين قبل استخدامه.
- 1 لا تستخدمه بالقرب من الأماكن القابلة للاشتعال والانفجار (بما في ذلك المرشات ومحطات الغاز وغيرها)؛ تجنباً لاندلاع الحرائق والمصعقات الكهربائية وغيرها من الأخطار.
- 1 درجة الحرارة المحيطة بالجهاز يجب أن تكون بين 5 ~ 40 درجة مئوية، يرجى التحقق من درجة حرارة الغرفة قبل استخدامه.
- 1 لا تلمس فتحة الضوء بعد الاستخدام فمن السهل جداً أن تتسبب بحروق بسبب درجة حرارتها المرتفعة جداً.
- 1 يجب تجنب المنطقة المشععة (من الجسم) التعرض مباشرة للأشعة فوق البنفسجية خلال 24 ساعة من الاستخدام.
- 1 إذا لم تعمل المروحة المثبتة داخلياً عند تشغيل الجهاز (لا يوجد صوت طنين) يجب عليك أن لا تستخدمه تقادياً للدخان والنار.

أمور يجب الانتباه لها:

لا تتعرض للشمس
قبل إزالة الشعر.



أصحاب البشرة الداكنة
يجب أن لا يستخدموا
هذا الجهاز.



تأكد من استخدامه
بدءاً من الدرجة
الأولى عند أول استخدام



قبل إزالة الشعر يرجى
حلقته أولاً. (لا تستخدم
مزبل شعر كيميائي)



يرجى لبس النظارات
الواقية عند الاستخدام



يمنع استخدامه في بيئة
مظلمة




لا تضرب أو تهز
الجهاز بعنف



لا تستخدمه في ضوء
الشمس المباشر تقادياً
للتسبب في عطل الماكينة



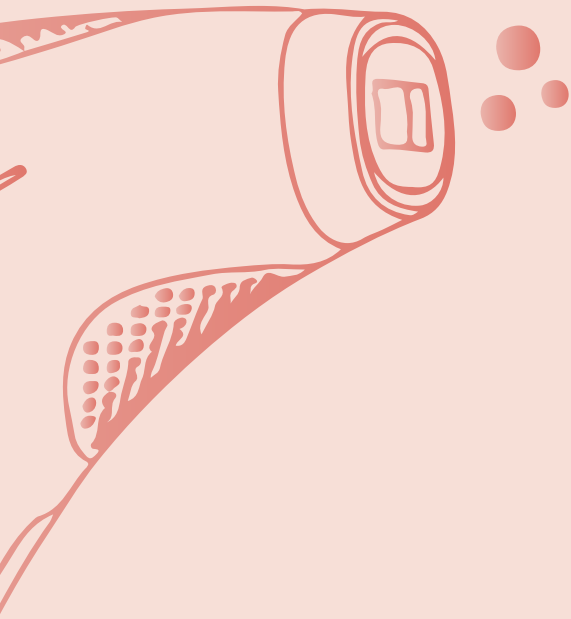

Brskjin